


Actim Pancreatitis

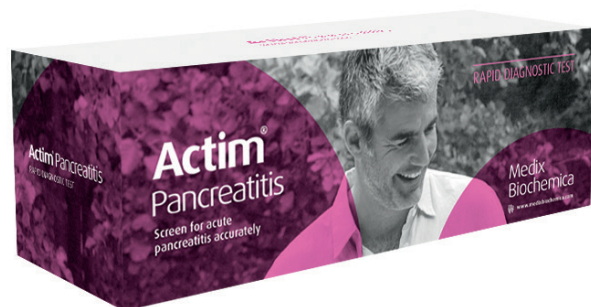

Набор экспресс-тестов Actim Pancreatitis для диагностики острого панкреатита.

Описание:

Новый способ диагностики острого панкреатита

Принцип работы: экспресс-тест Actim Pancreatitis основан на определении панкреатического фермента трипсиногена-2 в моче, который является оптимальным биомаркером при остром панкреатите. Actim Pancreatitis может

достоверно определять, как выраженный острый симптоматический панкреатит, так и ранний бессимптомный панкреатит.

Экспресс-тесты Actim Pancreatitis выявляют риск острого панкреатита также у пациентов, которые, вероятно, будут пропущены при использовании тестов на амилазу или липазу.

Наборы Actim Pancreatitis:

- 20 экспресс-тестов в наборе с инструкцией
- 10 экспресс-тест в наборе с инструкцией

Компоненты набора: комплект Actim Pancreatitis содержит 10 или 20 тестовых наборов. Компоненты каждого тестового набора: 10, 20 тест-полосок в герметичных пакетах из алюминиевой фольги с осушителем. Каждый комплект содержит также инструкции по применению.

Контроль Actim Pancreatitis Controls для экспресс-тестов для диагностики острого панкреатита.

Предел обнаружения: 50 мкг/л

Определяемое вещество: трипсиноген-2

Исследуемый материал: моча

Чувствительность: 100%

Специфичность: 96%

Время теста: 5 минут